



전기찜질기 사용설명서

SHINIL 전기찜질기



***제품을 세워서 사용하지 마십시오!**
(세워서 사용하면 열관 속의 광물이 한쪽으로 쏠려서 과열의 우려가 있습니다.)

안전에 위한 주의사항

안전에 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것으로 반드시 지켜 주시고, 다 알고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

- 과거 제품에 비해 온도가 낮아졌습니다.
전기용품안전관리법에 의하여 화상/화재 안전을 위해 온도가 낮게 제한되었습니다.
- 안전상의 이유로 '고' 온은 한시간 이하로만 설정되고, 장시간 사용은 '중' 온 이하로만 설정됩니다.
- 처음 전원을 켜시면 찜질기 특성상 온도가 서서히 올라가니 여유를 가지고 사용하십시오.

경고

- 본 제품 사용중 장시간 자리를 비우거나 외출시에는 반드시 전원을 껐 주십시오.
- 사용후에는 반드시 플러그를 뽑아주십시오. (본 제품은 고열이 발생하므로 화재의 우려가 있습니다.)
- 유아나 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오. (유아나 어린이가 전기를 잘못 취급시 감전의 우려가 있습니다.)
- 본 제품 사용시 수면을 취해서는 안됩니다. (화재 및 화상의 위험이 있습니다.)
- 신체가 자유롭지 못한 사람, 유아, 또는 열을 감지하지 못하는 사람은 사용하지 않습니다.
- 급성질환자, 악성종양환자, 고열환자, 심장장애나 임신중인 사람, 유아나 노약자, 의식이 없는 사람 등은 사용하지 않습니다.
- 사용자의 열에 대한 민감 정도에 따라 온열에 의한 화상의 우려가 있습니다.
- 젖은채로 사용하지 않습니다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 대리점 또는 유자격 기술자에 의해 코드 교환을 하십시오.


주의

- 기기를 임의로 개조하지 않습니다.
- 필요한 규정시간만 사용하십시오. (1회 사용시간 30~40분, 1일 2~3회 이내)
- 장시간 사용하는 경우에는 저온화상에 주의하십시오.
- 고온설정으로 오랜시간 사용시 화상의 우려가 있습니다.
- 기기의 고장을 발견하였을 경우에는 즉각 사용을 중지하십시오.
- 사용 중 신체에 이상이 발생하였을 경우 의사와 상담하십시오.
- 제품을 구기거나 접은 상태에서 사용하지 않습니다.
- 본 제품 사용시 아불을 덮거나 수면을 취해서는 안됩니다. (화재나 화상의 위험이 있습니다.)
- 라텍스(고무) 재질의 매트리스 위에서는 사용하지 않습니다.
- 전기매트, 온열기구, 온돌바닥 등에서 제품을 사용하지 않습니다.
- 소파 위에서는 사용하지 않습니다.
- 온도조절기에 습기가 노출되지 않도록 하십시오.
- 온도조절기를 발열부에 접촉시켜 사용하지 않습니다.
- 송곳이나 날카로운 물체로 장판을 찌르지 않습니다. (장판이나 전선의 단선등으로 제품의 손상이 올 수 있습니다.)
- 온도를 '저'로 설정해도 '고'의 온도처럼 뜨거울 경우에는 즉각 사용을 중지하십시오.
- 본 제품의 퓨즈 파손이나 고장이 나면 반드시 제조사 전문 유자격 기술자에 의뢰하십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 전원코드를 뽑아 주십시오.

이 기기는 가정용(II급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 방법

- 전원의 전압 220V를 확인합니다.
- 처음 전원스위치를 켜면(ON) 시간은 30분, 온도는 '고'에서 작동합니다.
- 1회 30분 정도, 하루에 2~3회 정도가 적당합니다.
- 1단에서 3단까지 온도조절기를 사용하여 자신에게 적당한 온도를 선택하십시오.
- 시간은 30분, 60분, 8시간 중 적당한 시간을 선택하여 사용하십시오.
- 종료시에는 전원스위치를 OFF 합니다.
- 온도 '고'에서는 고열이 발생하므로 장시간(8시간)을 사용할 수 없으며 30분, 60분은 작동이 됩니다.
- 온도 '고'에서 작동중 '8시간'을 누르면 온도는 자동으로 '중'으로 전환되며, '8시간'에서 작동중 온도 '고'를 누르면 시간은 자동으로 '60분'으로 전환됩니다.
- 제품의 먼지버는 세척하여 사용하실 수 있습니다.

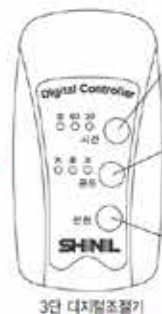

시간설정 스위치
시간은 30분, 60분, 8시간 중 적당한 시간을 선택하여 사용합니다.

온도설정 스위치
온도는 '저', '중', '고' 중 적당한 온도에 맞추어 사용합니다.

전원 스위치
전기공급을 연결해주고 차단합니다.

3단 디지털조절기

*조절기 디자인은 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

제 품 명	전기찜질기
보 증 기 간	12개월 이내 무상수리 (단 사용자 과실 제외)
구 입 일 자	20

자세한 표시사항은 제품 조절기뒷면 라벨을 참고하세요.

아래와 같이 보증합니다

1. 구입 후 제품의 하자로 인한 고장이 발생하였거나 정상적으로 동작이 되지 않는 제품은 즉시 교환하여 드립니다.
2. 제품 구입일로부터 12개월 이내에 정상적으로 사용한 상태에서 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드립니다.
3. 보증기간이 지난 후 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리하여 드립니다.
4. 보상기준, 제품수리, 교환, 환불에 대한 보상기준은 한국소비자원 소비자피해 보상 기준에 따릅니다.

SHINIL 신일산업주식회사

전국서비스 대표전화 : 1577-6667
충청남도 천안시 서북구 압정면 연곡리 308