


NAPOLI

신일 나폴리 안마인자
'사용 설명서'

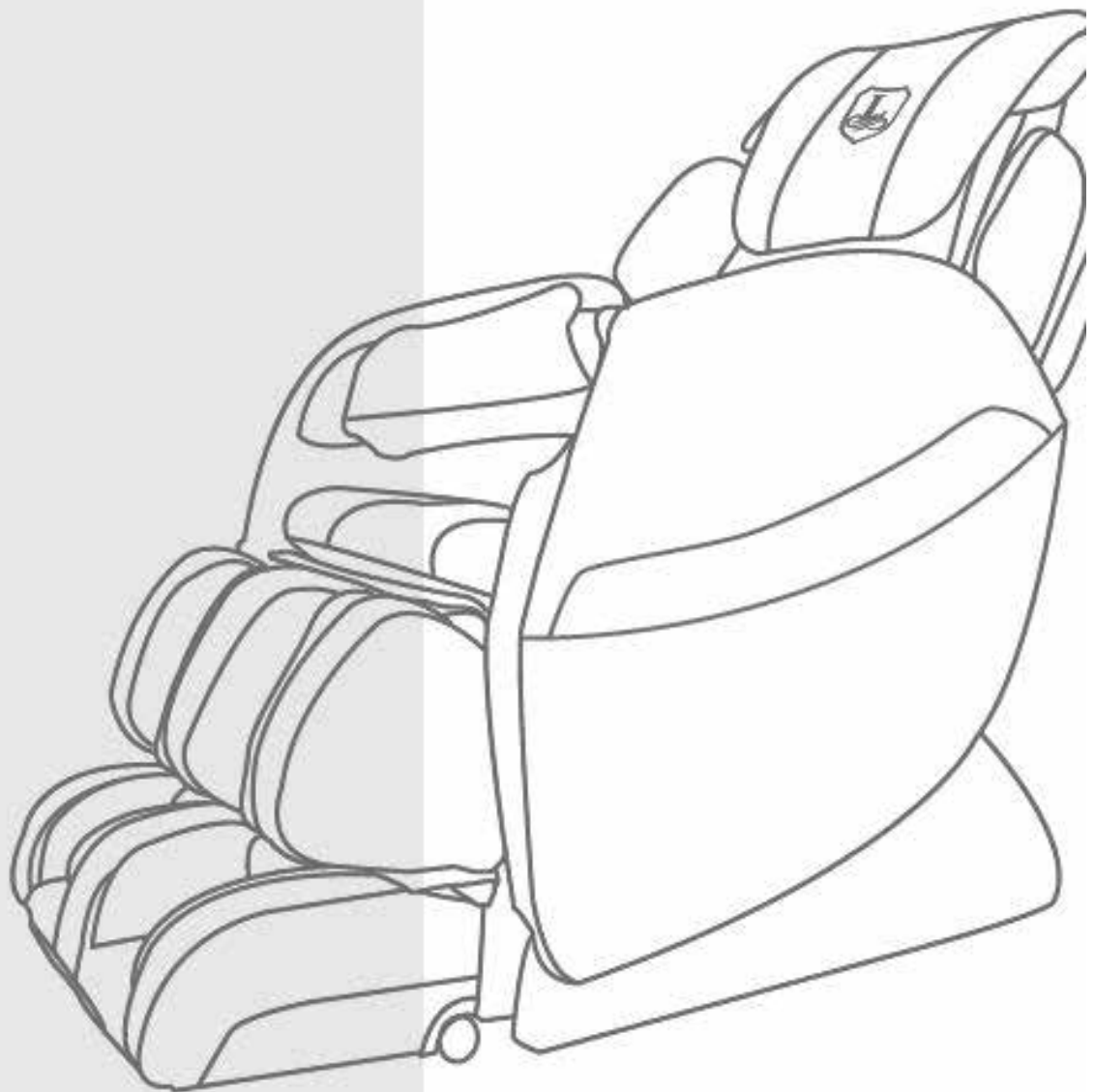

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

NAPOLI

WS형 3D입체 안마부

목부터 허리까지는 S자형으로 설계되어 구석구석 빠짐없이 3D입체 마사지가 가능하며, 일정각도 이상으로 누웠을 경우 허벅지까지 안마부가 내려가는 방식으로 전신에 마사지가 가능하도록 설계한 제품입니다.

발바닥 롤러

제2의 심장이라 불리는 발바닥을 더욱더 시원하게 마사지하도록 발바닥에 롤러를 채택하였습니다.

자동 및 수동프로그램

신체 하중을 분산시켜 가장 편안한 자세로 조절해주는 W마사지 기능을 포함하여 총 6개의 자동 프로그램 및 6개의 수동 프로그램으로 신체 구석구석 빠짐없이 가장 편안하고 시원한 마사지감을 제공합니다.

다리길이 조정

사용자 신장에 따라 최장 15cm까지 다리길이 연장이 가능하며, 키가 크신 분도 편안하게 마사지가 가능합니다.

각종 편의사항

엉덩이의 진동기능, 허리부분의 온열기능 등 작은 편의사항의 채택으로 더욱 더 풍부한 마사지를 제공합니다.

신일산업주식회사 인증현황



CONTENTS

1. 사용 전 알아보기	3
2. 안전을 위한 주의사항	4
3. 각부의 명칭	8
4. 특징점	9
5. 리모콘 조작방법	10
6. 청소방법	13
7. 관리 및 보관방법	13
8. A/S를 신청하기 전에	14
9. 제품 규격 및 사양	15
10. 제품보증서	16

전기용품안전인증 번호

모 델 명 : SHK-EC3600 / SHK-EC4600 [나폴리]

소비전력 : 120W

정격전압 : AC220V, 60Hz

관장시간 : 15분

제품색상 : 블루 / 브라운 투톤

제품무게 : 약 95kg


박스크기 : 1,260 x 770 x 860mm

최장크기 : 2,000 x 730 x 850mm

A/S 센터 1577-6667 / 홈페이지 www.shiniLco.kr

1. 사용 전 알아보기

제품 설치 시 욕실 등 습도가 많은 곳, 직사광선이 닿는 장소나 난방기구 앞 등 온도가 높은 장소에 설치하지 마십시오. 제품 설치 시 바닥이 손상되지 않도록 매트 위에 설치를 권장합니다.

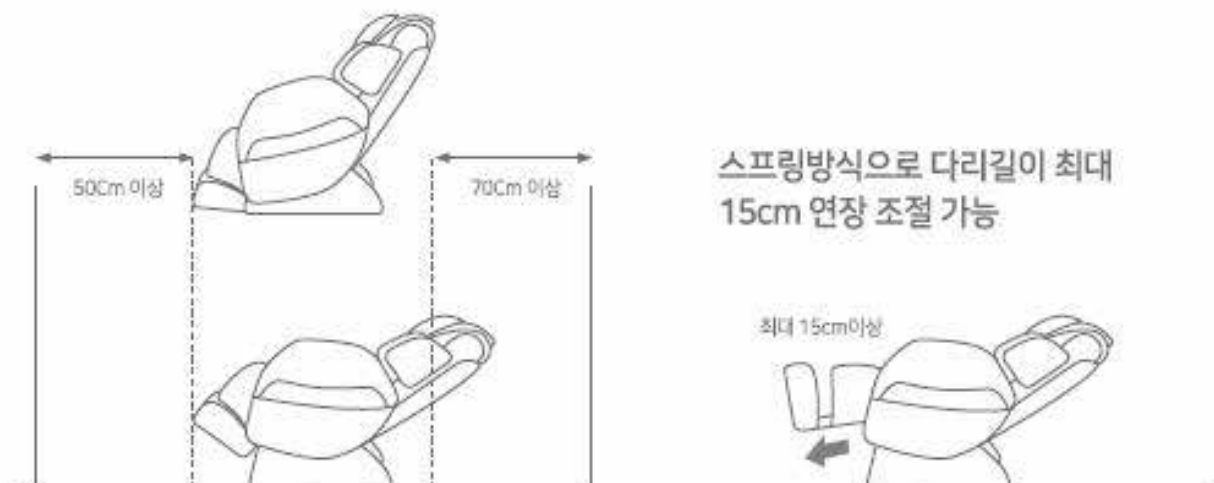

리클라이닝을 할수 있는 여유 공간을 확보하여 설치해 주십시오.

- A. 리클라이닝 동작시 등받이 뒤쪽과 발받침 아래에 어린이나 애완동물이 없도록 확인 후 조작 사용하여 주십시오.
- B. 등받이(backrest)가 작동시 벽에 부딪히거나 기타 다른 물체와 닿아서 파손되거나 기계손상을 예방하기 위해 최소 앞 50cm이상 뒤 70cm이상 간격을 두고 설치하십시오.


전원켜기 & 끄기

전원을 연결하시기 전에는 메인 콘트롤함에 있는 ON/OFF스위치는 항상 OFF위치에서 연결하여 주십시오.
(전기적 쇼크, 쇼트 방지)

- A. 전원 코드를 콘센트에 꽂으십시오.
- B. 사용 후에는 반드시 전원스위치는 OFF해 주시고 전원 플러그는 콘센트에서 분리해 주십시오.

접지방법

제품은 반드시 올바르게 접지하여 주십시오. 만일 고장나거나 미손되었을 때에는 전류가 그 저항의 가장 적은 접지선으로 흘러서 감전 위험성을 줄여줍니다.
본 제품은 장치접지 전도체와 접지 플러그가 있는 코드를 사용했습니다.

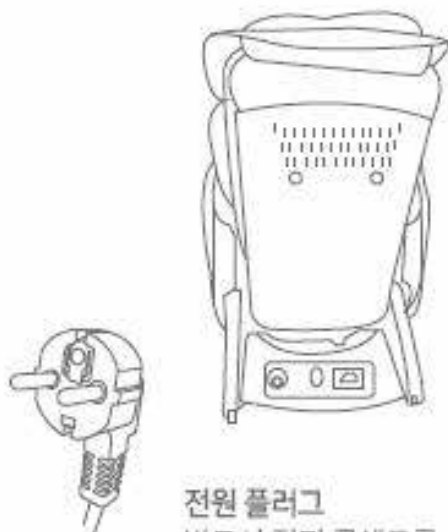

전원 플러그
반드시 접지 콘센트를
사용해 주십시오

2. 안전을 위한 주의사항

아래의 내용들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상하지 못한 위험이나 손해를 사전에 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오. 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급정도에 따라서 아래와 같이 구분하고 있습니다.

아래 주의사항은 제품 사용 시 안전에 관한 중요한 내용입니다. 꼭, 참고하시기 바랍니다.

경고 / 주의 표시

 경고	표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 주의	표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우


본 제품의 취급을 잘못 할 경우 사용자가 상해를 입거나 물적 손해가 발생하는 위험이 예상되는 경우가 발생할 수 있습니다.
 본 제품의 사용은 최대한 유익하고 편리해야하며, 만일 통증이나 불편함을 느낄 때에는 즉시 사용을 중단하고 전문의에게 상담을 받으십시오.
 또한, 현재 의료치료중이거나 아래 명시하는 사항에 해당하는 분은 사용 전에 반드시 담당의와 상담을 하신 후 사용하십시오.

해당되는 사용자는 주의하세요!

- 건강에 이상을 느끼거나 신체에 이상이 있는 경우
- 골다공증 환자 또는 뼈가 약한 분
- 탈골로 인하여 병을 앓고 있는 분
- 의사의 치료를 받고 있거나 외과 수술 후 완치되지 않으신 분
- 척추가 흰 분, 어린이, 음주자
- 생리 중 여성이나 임산부 및 혈전증, 동맥류, 급성확정 정맥염 및 그 밖의 순환계 질환자
- 상처가 완쾌되지 않았거나 알레르기 질환 및 민감성 피부
- 암 환자 및 종양을 가진 분
- 급성 질환이 있는 분
- 심장병 환자 및 인공심장 박동기, 체내 금속물질을 착용한 분
- 등, 목, 어깨, 둔부에 통증이 있는 분
- 의수와 의족을 하신 분
- 정신지체 장애가 있는 분
- 마사지 부위에 상처가 있거나 마사지로 인하여 부작용이 우려되는 분
- 장기간의 병원 치료나 후유증을 가지고 있는 분

⚠ 경고

- 전원이 AC220V인지 확인후 플러그를 꽂아주십시오.

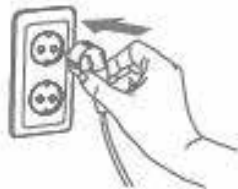

- 전원 코드를無理하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오. (감전, 화재의 원인)




- 젖은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오. (감전, 부상의 원인)



- 플러그를 뺀 후 제품을 청소 하십시오.



- 전원을 뽑기 전에 메인 스위치를 OFF해 주십시오.

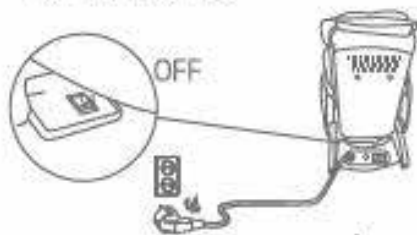


- 전원 플러그가 손상 시에는 사용을 삼가하시고 서비스 센터로 연락하여 주십시오.



- 전원플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오. (감전, 화재의 원인)



- 반려견 및 아이들의 손이 닿지 않도록 주의하여 주십시오.

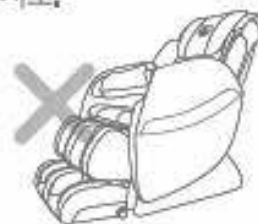

- 소비자가 직접 제품을 분해하지 마십시오. (전기쇼크 및 상해의 원인)



- 어린이가 혼자 사용하게 하지 마세요. (감전의 위험)




⚠ 경고 / 주의


- 한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. (감전 및 화재의 원인)



- 싱크대 주변이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오. (감전 및 전기누전의 원인)

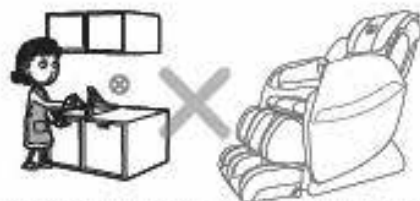

- 직사광선이나 열기구 또는 습기찬 장소에 보관하지 마십시오. (변색 및 고장의 원인)

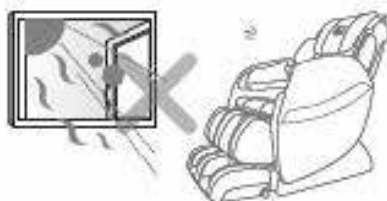

- 스토브나 온열기구 옆에 설치하지 마십시오. (변색 및 고장의 원인)



- 의자에서 주무시는 것을 금하며, 사용중에 몸에 이상을 느끼실 경우 즉시 사용중지 하여 주십시오.



- 과도한 마사지와 신체의 한부위에 5분이상 자극을 금지합니다. (수동일 경우)



- 제공된 부속품 이외의 것은 사용을 금합니다.



- 의자설치는 수평이 잘 잡힌 곳에 설치하여 주십시오.



- 등, 힙, 다리부분의 커버에 조그마한 흠집이 발생시에는 사용을 금하며, 즉시 A/S센터로 문의하여주십시오.



- 머리장식등과 같이 단단한 물건을 착용하고 제품을 사용하지 마십시오.



⚠ 주의

- 반드시 사용설명서를 숙지하고
사용하십시오.



- 리모콘과 안마의자는 항상
다른상태를 유지
하여 주십시오.



- 마사지볼을 손으로 직접 누르거나 발로 밟고
올라 타지 마십시오.



- 마사지 작동 중 마사지볼 중간에 손을 직접 대지
마십시오.



- 안마의자의 등받이, 옆판, 발 안마부에
앉거나 서지 마십시오.



- 안마의자 동작중에 이동시키지 마십시오.



- 안마의자 동작중에 강제로 전원을 뽑지
마십시오.



- 발 안마부 작동중에 손이나 머리를 대지
마십시오.




- 샤워 후 물기가 있는 상태에서 사용하지
마십시오.



- 맨몸이나 너무 얇은 옷을 입고 사용하지
마십시오.




3. 각부의 명칭

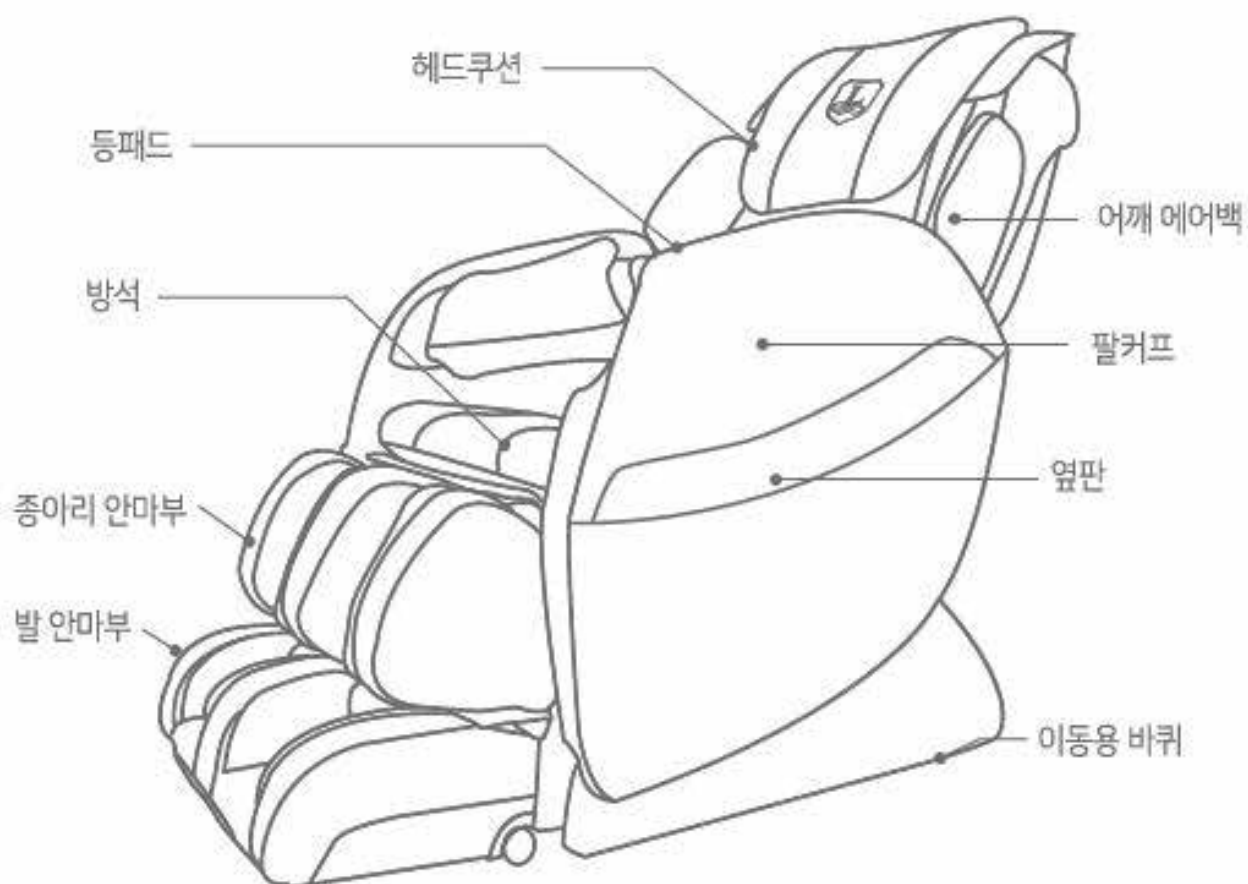

4. 특징점

나폴리 특징점 1

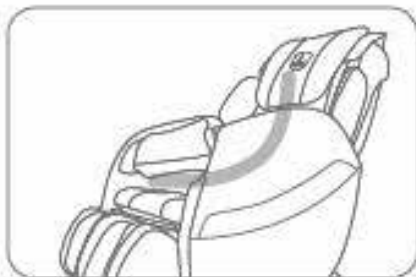

WS 안마부

목부터 허리까지는 S자형으로 설계되어 구석구석 빠짐없이 3D입체 마사지가 가능하며, 일정각도 이상으로 누웠을 경우 허벅지까지 안마부가 내려가는 방식으로 전신에 마사지가 가능합니다.

나폴리 특징점 2



발바닥 롤러

제2의 심장이라 불리는 발바닥을 더욱더 시원하게 마사지하도록 발바닥에 4개의 롤러를 채택하였습니다.

나폴리 특징점 3



엉덩이 진동기능 / 온열 기능

2단계로 조절 가능한 엉덩이 진동기능과 허리부분의 2점 온열기능으로 더욱 더 풍부한 마사지가 가능합니다.

5. 리모콘 조작방법_1




5. 리모콘 조작방법_2

자동프로그램

해당되는 자동안마 버튼을 누르면 자동모드로 전환됩니다.

	• 전원 제품의 전원을 켜고 끄는 기능입니다.
	• 시간 조절 기본 세팅된 시간 외 5분 단위로 최대 30분까지 시간의 연장 및 조정이 가능한 기능입니다.
	• 시작 / 일시정지 작동시 한번 누를시 일시정지, 한번 더 누를시 재 작동하는 기능입니다.
	• 스포츠 모드 등, 허리 부분에 강한 지압 위주의 마사지 기능입니다.(15분)
	• 회복 모드 전신을 주무름, 지압 등 약한 강도의 기능 위주로 긴 시간 동안 편안하게 마사지하는 기능입니다.(15분)
	• 휴식 모드 작동시 중간중간 각도를 변환하여 엉덩이 포함 전신을 부드럽게 마사지하는 기능입니다.(30분)
	• 스트레칭 모드 하체와 상체를 늘어뜨리는 방식으로 마사지하는 스트레칭 기능입니다.(15분)

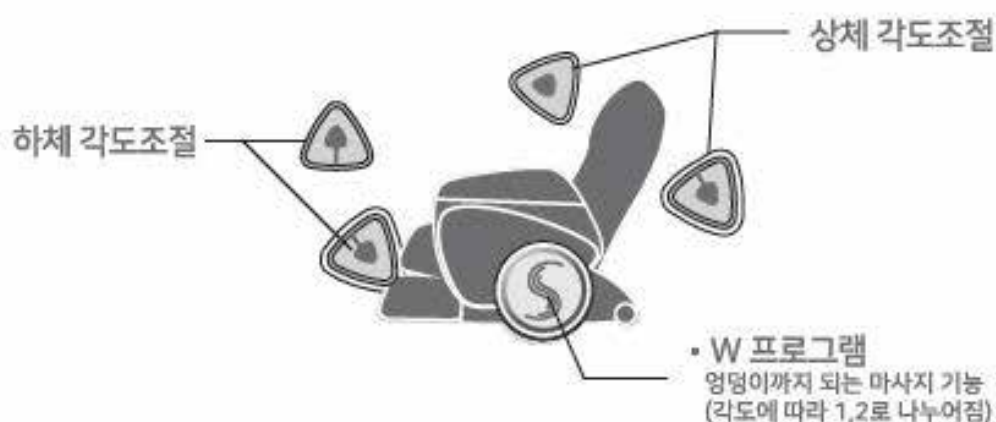

5. 리모콘 조작방법_3

수동프로그램

해당되는 수동안마 버튼을 누르면 수동모드로 전환됩니다.

	· 수동안마 주무름, 복합두드림, 두드림, 지압, 손날두드림, 입체안마 의 6가지 수동모드를 조절하는 기능입니다.
	· 모드변환 각 수동안마 기능에서 안마방식을 변환해 주는 기능입니다.
	· 속도 안마부의 속도를 5단계로 조정하는 기능입니다.
	· 롤러 발바닥에 위치한 롤러 기능을 켜고 끄는 기능입니다.
	· 온열 허리 부분에 위치한 온열 기능을 켜고 끄는 기능으로 온열 작동시 최대 65도의 따뜻한 찜질 효과를 제공하는 기능입니다.
	· 진동 엉덩이 부분에 위치한 진동 기능을 켜고 끄는 기능이며, 2단계로 조절 가능합니다.
	· 에어강도 에어백의 강도를 5단계로 조정하는 기능입니다.
	· 수동에어 총 24개의 에어백이 다리, 팔, 어깨, 발 순으로 순차적으로 마사지를 하는 프로그램입니다
	· 안마부 이동 수동 안마시 안마부의 위치를 상/하로 조정하는 기능입니다.
	· 폭 조절 등 안마부의 폭 넓이를 조절하는 기능으로 3단계로 조절이 가능합니다.
	· 집중/부분 선택된 부분에 집중적인 마사지 또는 부분적인 마사지를 하는 기능입니다

6. 청소방법

마른 수건으로 안마의자에 묻은 땀을 닦습니다.
알콜이나 가솔린 등 휘발성이 높은 용액은 사용하지 마시고,
농도가 낮은 중성세제를 사용하여 표면을 닦은 후 부드러운 헝겊으로
물기를 닦아내서 자연 건조시켜 주십시오.

머리쿠션, 등받이, 엉덩이 쿠션, 다리 안마부, 팔커프,
엽판, 팔거치대, 등판 커버는 마른걸레로 닦아 주십시오.

- 안마의자 청소 전 반드시 전원 코드를 뽑고 젖은 손으로
전원을 접촉하지 마세요.
- 물로 안마의자를 청소하지 마세요.
- 드라이기로 안마의자를 말리지 마십시오.
- 휘발유, 희석제, 알칼리성 세제, 표백제 등을 사용하지 마십시오.

관리, 청소하기전에 반드시 전원을 끄고
전원 플러그를 뽑아야 합니다



7. 관리 및 보관방법

- 1) 안마의자의 사용 수명을 연장 하려면 연속 20분 사용후 15분정도 기기를 멈추십시오.
- 2) 사용 후 다리 안마부와 등받이를 원상태로 복귀시켜 주십시오.
- 3) 발 마사지 부분을 무리하게 누르거나 힘을 주어 사용하시면 기기 파손의 원인이 됩니다.

안마의자를 다음의 조건하에 보관하여 주십시오.

- 먼지가 적고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 온풍기나 화로 등 고온장소에 설치하지 마십시오.
- 의자를 장시간 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 습하고 기름먼지나 수증기가 많은 장소에 보관하지 마십시오
- 부식성기체와 함께 보관하지 마십시오
- 주위 사용온도: 0℃ ~ 40℃
- 주위 사용습도: 30%RH ~ 85%RH



8. A/S를 신청하기전에

증 상	처 치 방 법
마사지 작동시 등쪽에서 미세한 소음이 나요.	정상 작동 시 발생하는 미세한 소음은 안마의자의 구조적 특성상 자연스러운 현상이며 기기의 기능과 수명에 영향을 미치지 않습니다.
두드림과 주무름 진행시 소음이 나요.	
주무름 또는 두드림 전환시 소음이 나요	
에어마사지 작동시 "픽~픽" 소리가 나요.	
전원 연결후 안마의자가 작동하지 않아요.	1) 전원플러그와 콘센트가 올바르게 연결 되었는지 확인하세요.
	2) 안마의자의 전원 스위치가 켜졌는지 확인하세요.
	3) 전원 스위치가 켜졌는데도 리모컨 작동버튼에 불이 들어오지 않았을 경우 전원을 끄고 콘센트에서 전원플러그를 분리한 후 휴즈 상태를 확인하세요.
사용도중 안마의자가 작동하지 않아요.	장시간 사용으로 인해 안마의자가 과열되면 작동을 멈추게 되므로 잠시 작동을 멈춘 후 다시 작동 바랍니다.
리모컨과 안마의자가 작동하지 않아요.	설정된 마사지 시간이 종료되면 다른 버튼을 눌러 다시 작동할 수 있습니다.

9. 제품 규격 및 사양

제품명	SHK-EC3600 / SHK-EC4600[나폴리]
제품 무게 (박스포함)	(박스포함) 95Kg(105Kg)
사용전력	220V / 60Hz / 120W
자동안마 시간	최소5분 ~ 최대30분(5분간격 조절)
외피	인조가죽
제품 사이즈 (길이/폭/높이)	1,440 X 730 X 1,190
등각도	116도 ~ 168도
다리각도	0도 ~ 90도
최대길이(눕혔을 때)	2,000 X 730 X 850
자동모드 프로그램	스포츠 / 회복 / 휴식 / 스트레칭
수동모드 프로그램	주무름 / 복합두드림 / 두드림 / 지압 / 손날두드림 / 입체안마
에어백 / 지압돌기	24개 / 12개
리모컨	유선 리모컨
전기용품 안전인증	
적합성 식별부호	

A/S 고객센터 : 1577-6667

* 본 사용자 설명서의 제원 및 사양, 이미지 등은 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

10. 제품보증서

제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명 :	보증기간	고객주소	성명	
모델명 :	년	판매점 주소(상호)	전화	
구입일자 :			성명	
보증기간 :	까지		전화	

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일, 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

신일산업주식회사



A/S 고객센터 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

+ 무상수리기간은 제품설치 후 1년 입니다.

+ 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비용이 발생되지 않습니다.

- 1) 처음 설치할때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

+ 다음의 경우에는 실비의 서비스 비용 및 부품비용이 발생합니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의 (운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S 센터가 아닌 다른 업체에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 설치 완료 후 별도로 이전 및 설치 비용은 유상입니다.
- 6) 외피 및 엉덩이, 머리 쿠션은 소모품이므로 교체 시 비용이 발생합니다.
- 7) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

 **신일산업주식회사**