

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 ITO 스마트 체중계 사용설명서

SHINIL ITO Smart Weight Meter User Manual

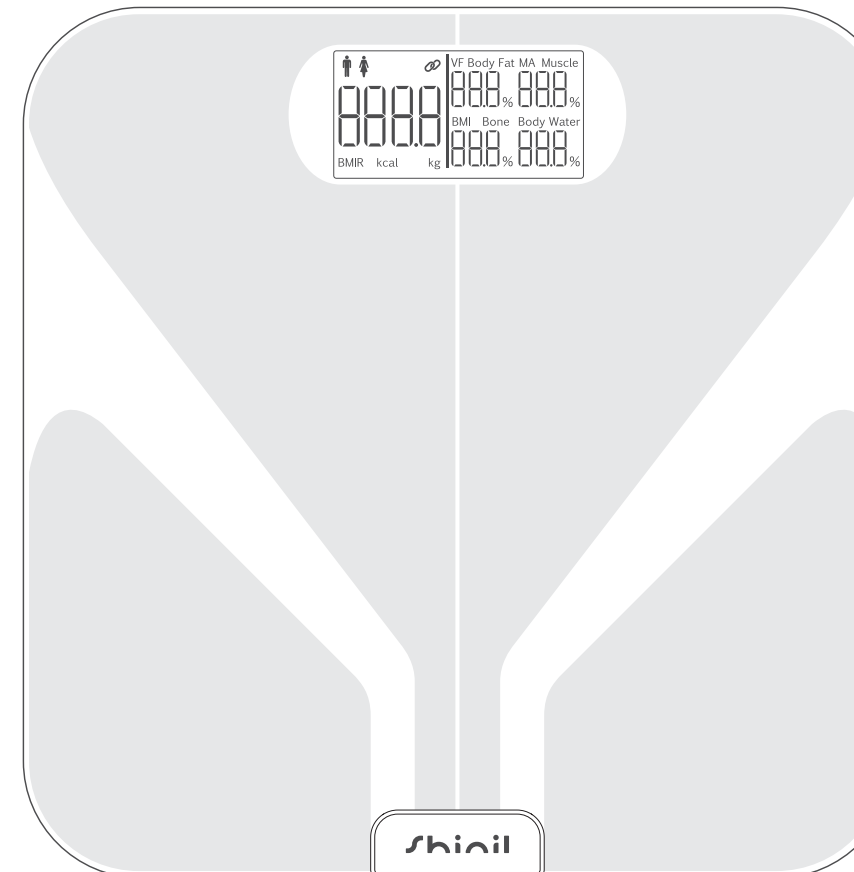


제품의 특징

- 6mm 안전 강화유리 사용
- 사용할때만 켜지는 On/Off 기능
- 4개의 고정밀 센서 적용
- ITO 필름 사용으로 어느 위치든 정확한 측정값 확인
- 전용스마트 앱을 통한 8가지 신체데이터 관리
- 한번의 앱 연동 이후 앱 없이 체중계 LCD 화면을 통해 8가지 신체데이터 확인

제품 상세 설명

모 델 명	SHM-D300AK	체성분 측정방법	ITO 필름을 통한 BIA생체전기 저항분석법
제 품 크 기	325 x 325 x 28mm	전 송 방 식	블루투스 4.0
무 게	2kg	전 원	1.5V AAA건전지 4ea
최소단위표시	0.1kg	운 영 체 제	iOS 9.0이상 / Android 4.4이상
체중측정범위	3kg ~ 180kg	화 면 크 기	3.7" LED 디스플레이
자동 On/Off 기능			

제품의 명칭

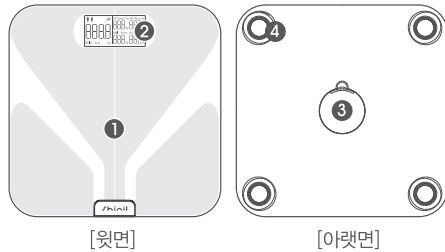

- ① 측정대
- ② 숫자 표시부(LCD 창)
- ③ 건전지 교환
- ④ 정밀 센서

제품의 LCD표시사항



측정 무게 초과

※ 체중계에서 내려오세요.
(최대 180kg)
기계 고장의 원인이 됩니다.



디스플레이 표시 없음

※ 건전지를 교체해 주시기 바랍니다.



건전지 교체 필요

※ 만약 아무 표시도 나타나지 않고
측정도 되지 않으면, 건전지가
완전히 방전된 것 입니다.
이러한 경우에는 건전지를 교체
하셔야 합니다.



지방 측정 오류

※ 재 측정 바랍니다.

사용방법

체중계 사용방법


- ▶ 체중계를 평평한 바닥에 놓으신 후 체중계에 올라 섭니다.
- ▶ 수 초가 지나면 측정된 수치가 LCD 창에 나타납니다.
- ▶ 체중계에서 내려오시면 잠시후 작동이 멈추고 전원이 차단됩니다.

최초 사용시나 건전지 교체 후 처음 사용시

- ▶ 건전지를 체중계 본체에 바르게 끼워 넣습니다.
- ▶ 체중계를 평평한 바닥에 놓으신 후 체중계에 올라 섭니다.
- ▶ 수 초가 지나면 측정된 수치가 LCD 창에 나타납니다.
- ▶ 최초 사용시나 건전지 교체 후 처음 사용시(2~3회) 정확한 측정이 되지 않을 수 있습니다.
고장이 아니오니 재 측정 하시기 바랍니다.
- ▶ 체중계에서 내려오시면 잠시후 작동이 멈추고 전원이 차단됩니다.

LCD 창에서 8개의 측정 데이터 확인 방법

- ▶ 최초 신일 스마트 체중계 앱과 연동 후에는 앱 실행 없이 체중계 LCD 창에서 8개의 측정 데이터를 확인할 수 있습니다.
주의: 8개의 측정데이터가 나오기 전까지 맨발로 체중계에 올라서야지만 정확한 측정이 가능합니다.
- ※ LCD 창에 8개의 측정데이터가 두 개의 화면으로 분리되어 반복하여 보여집니다.
(각 화면을 순차적으로 2회 반복)

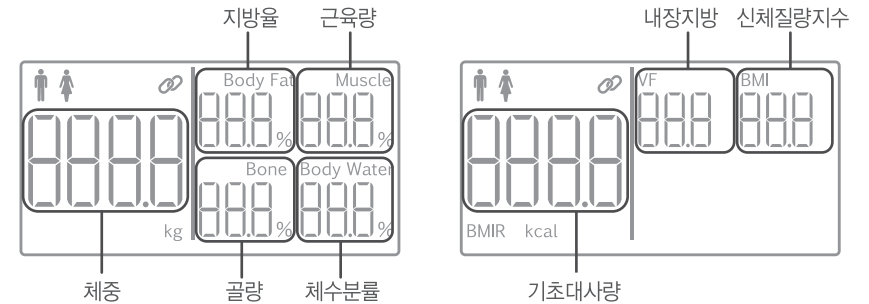

주의사항

- ▶ 본 제품의 측정값은 의학적 소견이나 진단에 사용 될 수 없습니다.
- ▶ 다이어트나 운동계획 단계 시 반드시 의사나 전문가와 상담하시기 바랍니다.
- ▶ 제품의 모서리에 서거나 제품 위에서 뛰지 마시오.
- ▶ 최대 용량을 초과하여 측정하지 마시오.(최대 180kg)
- ▶ 제품 표면을 닦을때는 축축한 천이나 유리 닦는 천을 사용하세요.
- ▶ 측정시에는 단단하고 마른 평평한 바닥에서 측정하세요.
- ▶ 건전지 삽입 시 극성에 주의하여 바르게 삽입하세요.
- ▶ 제품을 사용하지 않을 때는 건전지를 제거한 채로 보관하는 것을 추천합니다.

“신일 스마트 체중계 프리미엄” 앱 사용 방법

“Play 스토어”에서 “신일 스마트 체중계 프리미엄” 앱을 다운로드 받아 설치하시기 바랍니다.

※ 본 제품은 휴대폰이나 기타 제품에 블루투스를 통하여 연결 됩니다. 측정 결과는 앱에서 확인 할 수 있습니다.

설치 전 블루투스 기능과 위치 서비스 기능을 켜시면 보다 빠른 설치를 하실 수 있습니다.

(블루투스를 켜 놓으시면 앱과 체중계를 연동시켜 사용 하실때만 자동으로 “SHINIL ITO SCALE”에 연결되며 사용하지 않으실 때는 자동으로 연결해제 됩니다.)

블루투스 4.0 안드로이드 4.4버전 이상, iOS 9.0 이상에서 사용하실 수 있습니다.

(이전 버전에서는 호환성의 문제로 앱 사용이 제한 될 수 있습니다.)

※ iOS에서는 화면이 다르게 보일 수 있습니다.(iOS에서는 “위치정보 허용” 페이지가 없습니다.)

1. 앱 설치 및 사용 방법(안드로이드)

1) 앱 설치




2) 앱 설치 후 “열기” 클릭



3) 위치정보 “허용” 클릭



4) 3페이지의 “회원가입” 버튼 클릭

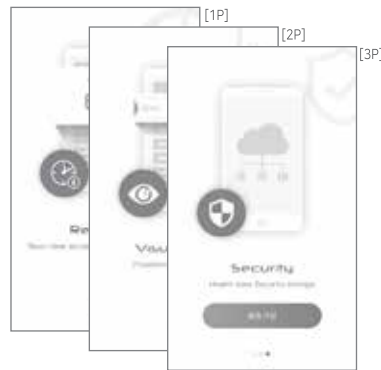

5) 개인정보등록



6) 권한설정



7) 측정 준비



맨발로 양 발을 자연스럽게 양쪽 측면에 올려줍니다.

8) 새로운장치 추가



- ▶ 개인정보를 등록하려면 이름, 성별, 키, 나이, 목표 체중을 입력해야 합니다.
- ▶ 이미지를 클릭하면 원하는 사진을 등록할 수 있습니다.

- ▶ 블루투스 기능과 위치 서비스 기능을 켜야만 사용 가능합니다.

- ▶ 최초 신일 스마트 체중계 앱을 실행시키고 맨발로 체중계의 전극판에 올라서면 앱과 체중계가 연동되어 자동으로 측정합니다.

- ▶ 움직이지 않은 상태에서 체중계의 LCD창에 숫자가 깜박거릴 때까지 측정합니다.
- ▶ 측정이 되지 않을시 앱을 재시작하거나 재설치하여 재측정하시기 바랍니다.

9) 측정(기기 연동 및 측정)



- ▶ 측정이 완료되면 자동으로 앱에 측정 데이터가 전송됩니다.

10) 데이터 확인



- ▶ 총 8개의 신체 데이터를 확인 할 수 있습니다.

2. 재측정 방법

1) 재측정(최초 측정)

앱 설치 후 최초 자동 측정이 되지 않거나 기기 연동이 되지 않았을때 우측하단의 측정버튼  을 클릭하면 측정을 시작 합니다.

※ 맨발로 체중계에 올라선 후 측정 버튼을 누르고 움직이지 않은 상태에서 체중계의 LCD창에 숫자가 깜박거릴 때까지 측정합니다.

※ 측정이 되지 않을시 앱을 재시작하거나 재설치하여 측정하시기 바랍니다.



[기기 연동 및 측정 완료]

2) 기기 연동 상태에서 재측정

기기 연동 상태에서 측정이 우측하단의 측정버튼  을 클릭하면 측정을 시작 합니다.

※ 맨발로 체중계에 올라선 후 측정 버튼을 누르고 움직이지 않은 상태에서 체중계의 LCD창에 숫자가 깜박거릴 때까지 측정합니다.



[측정 완료]

사용방법

3. 데이터 확인

측정이 완료되면 자동으로 앱에 측정 데이터가 전송됩니다.

※ 체중계를 여러 대의 스마트기기에 연결 사용시 데이터를 전송 받을 스마트기기만 “신일 스마트 체중계 프리미엄” 앱을 실행시켜주시고 다른 스마트기기는 “신일 스마트 체중계 프리미엄” 앱을 종료한 후 사용하시기 바랍니다.
다른 스마트기기의 앱을 종료하지 않고 사용시 측정 데이터가 먼저 연결된 다른 스마트기기로 전송 됩니다.

총 8개[체중, BMI(신체질량지수), 지방율, 근육량, 체수분율, 내장지방, 골량, 기초대사량 (BMR)] 항목에 대하여 측정 데이터를 확인 할 수 있으며 홈 화면의 데이터를 클릭하거나 기록의 데이터를 클릭하면 자세한 내용을 확인 할 수 있습니다.




▶ 측정 데이터를 클릭하시면 자세한 신체사항을 확인 할 수 있습니다.

- ▶ 그래프 전체(가로) 화면 보기
- ▶ 체중 그래프
- ▶ BMI 그래프
- ▶ 지방율 그래프
- ▶ 체수분율 그래프
- ▶ 근육량 그래프

▶ < 버튼을 클릭하면 측정 데이터를 온라인으로 공유 할 수 있습니다.

▶ “체중 ▼” 버튼을 클릭하면 8개의 측정 데이터를 확인 가능하며 데이터 항목을 클릭하면 자세한 신체사항이 확인 가능합니다.

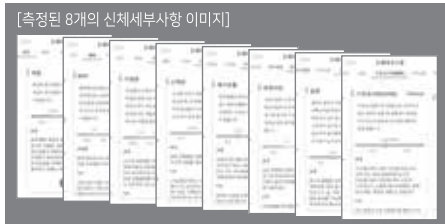

4. 설정



- 1) 개인정보를 클릭하면 사진, 이름, 성별, 키, 나이, 목표 체중을 변경 할 수 있습니다.
- 2) 기기연동 : 연결된 기기를 확인 할 수 있으며 장치 추가 및 해제를 할 수 있습니다.
- 3) 단위전환 : 측정 단위를 kg, lb로 변경할 수 있습니다.
- 4) 계정 : 계정의 추가 및 삭제가 가능합니다.
- 5) 구글 Fit, Fibit에 연결 가능합니다.
※ 호환성 및 기타 문제로 인하여 연결 기능이 중단 될 수 있습니다.
- 6) 개발자 문의
- 7) 자주묻는질문
- 8) 신일 스마트체중계 정보 : 앱 버전 정보

자주하는 질문과 답변

■ 자주하는 질문과 답변

Q1) 동작하지 않습니다. LCD 창에 데이터가 나오지 않습니다. LCD 창에 데이터가 깜박거리다가 사라집니다.

A1) 건전지가 올바르게 장착되어 있는지 확인 하시고, 건전지 잔량을 확인하시고 건전지를 교체 해 주세요.

Q2) LCD 창에 “Err” 이라고 뜹니다.

A2) 발바닥이나 제품 표면이 젖어 있는지 확인 하세요.

– 최대 측정 무게를 초과하였는지 확인하세요.(최대 180kg)

Q3) 제품이 앱과 연결 되지 않습니다.

A3) 앱은 측정 시 반드시 구동되고 있어야 합니다.

– 휴대폰의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.

(Android 사용자는 위치 서비스 기능도 켜져 있는지 확인하세요.)

– 블루투스를 껐다가 다시 켜시고 휴대폰 앱을 재구동하세요.

Q4) 측정 시 본체의 체중만 보입니다.

A4) 반드시 건조한 맨발로 측정 하셔야 합니다.

– 휴대폰의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.

(Android 사용자는 위치 서비스 기능도 켜져 있는지 확인하세요.)

– 최초 신일 스마트 체중계 앱과 연동하였는지 확인 하세요.

(앱 연동 없이 체중계상 데이터 값을 확인 하시고 싶으시면 앱과 반드시 한번 이상의 연동이 필요합니다.)

– 8개 데이터가 나오기 전까지 체중계에서 내려오지 마세요. (측정 시 약 8~10초가 소요됩니다.)

알림

- 체내에 심박박동기를 사용하거나 다른 기계를 사용중인 사람은 사용을 권장하지 않습니다.
- 임신부의 경우 측정이 부정확할 수 있으니 사용을 권장하지 않습니다.
- 체중 외 지방이나 다른 항목을 측정하기 위해서는 반드시 건조한 맨발로 측정 하세요.
- 과도한 운동 직후 측정하지 마세요.
- 측정은 하루 중 동일 시간대로 측정하세요.
- 이 장치는 최대 10명의 사용자가 앱 등록을 할 수 있습니다.

표시설명



경 고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측 위 그림은 분해 금지 표시, 좌측 아래 그림은 물접촉 금지 표시입니다.)

경 고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사는 책임을 지지 않습니다.



금지

제품 바닥이 단단하며 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 평탄하지 않은 곳에서는 작동하지 않으며 위험합니다.



물접촉 금지

물기가 있는 손발로 제품을 사용하지 마십시오. 안전사고의 위험이 있습니다. 욕실등의 습기가 많은 곳에서 사용을 금합니다.



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.



서	울
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경	기
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/안성	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	전
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
청주/괴산/충청/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광	주 / 전 남
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대	구
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경	북
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/인동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북 기타 지역	
부	산
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)